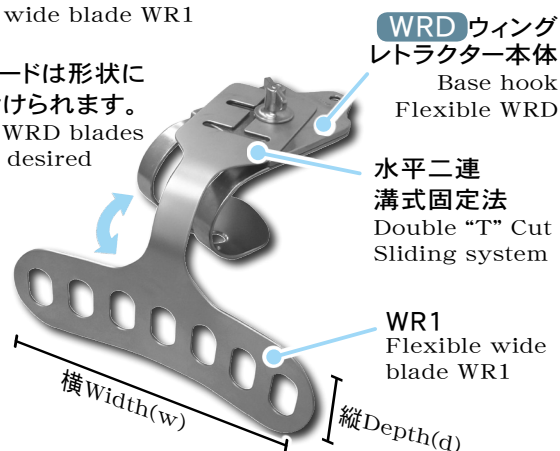
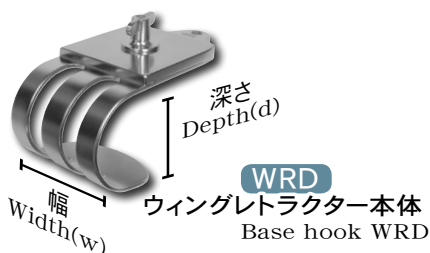
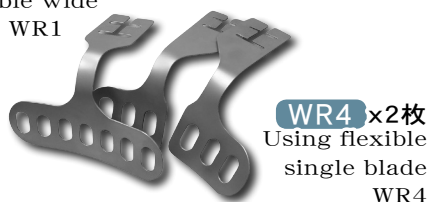
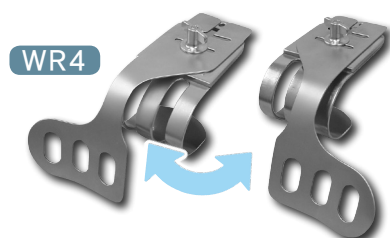


ケント ウィングレトラクターの特徴
The features of Wing Retractor

- 上腹部手術に適した設計。
Suitable structure for Upper Abdomen Operation
- 幅広く肝臓を圧排。Widely suppressing liver
- ブレードを本体から外さずに圧排位置を変更出来る
水平二連溝固定法。
Double "T" Cut Sliding system allows to slide the suppressing position with only loosening a screw.
- ブレードの自由な組み合わせが可能。
Free combination by detachable blades
- 有窓ブレードは軽量で曲げる事が可能。
Light and flexible blades

WRD ウィングレトラクター本体+ WR1 の組合せ例
An example of the combination for Base hook and Flexible wide blade WR1有窓ブレードは形状に
変化を付けられます。
Flexible WRD blades
meet the desired
position.

使用例 Examples of usage

WR1
Flexible wide
blade WR1WR4 ×2枚
Using flexible
single blade
WR4手元まで圧排
Deep flexibilityブレードの曲げ方で左右反転可
Blade is useful reversibly.片翼3窓型×2枚固定
Two single blades
can be combined.圧排位置の変更が容易
Easy adjustment of the
suppressing direction

COMPONENTS: TKZ-F10328-WRS

	品 名 Description	数 量 Q'ty
TKZ-F10328-WRD	ウィングレトラクター本体 Base hook WRD w60mm × d50mm	1個
TKZ-F10328-WR1	WR用ブレード両翼7窓型 Flexible wide blade WR1 w170mm × d50mm	1枚
TKZ-F10328-WR2	WR用ブレード片翼4窓型 Flexible single blade WR2 w100mm × d50mm	1枚
TKZ-F10328-WR3	WR用ブレード両翼5窓型 Flexible wide blade WR3 w140mm × d50mm	1枚
TKZ-F10328-WR4	WR用ブレード片翼3窓型 Flexible single blade WR4 w85mm × d50mm	1枚