
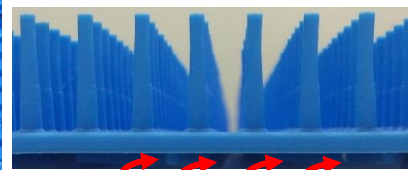
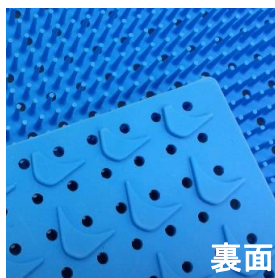


SILICON MAT

シリコンマット

オートクレーブ滅菌対応

滅菌器で滅菌する際に、ケースと器具、器具同士の接触による破損やキズの発生を防止する為に、トレーやケースに敷いて使用するシリコンマットです。

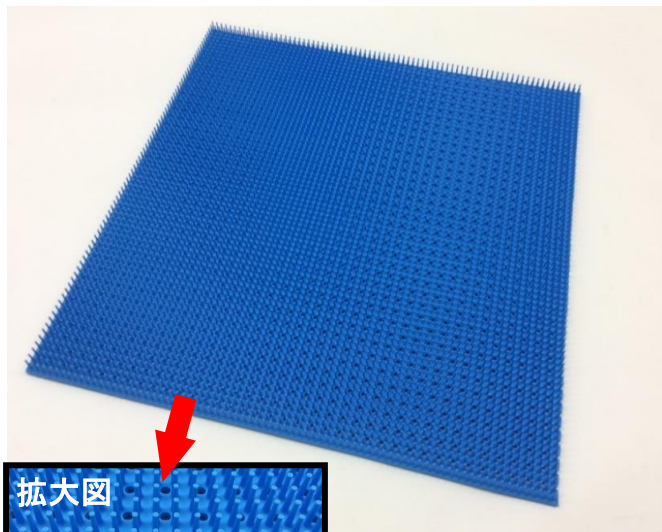


拡大図

裏面

・裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し、より滅菌効率を高めるデザインとなっております。

- ・コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
- ・全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。(穴径φ4mm)
- ・シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。(ピン長さ14mm)
- ・**オートクレーブ滅菌対応**。耐熱温度:瞬間280℃, 長時間200℃。

サイズは3種類

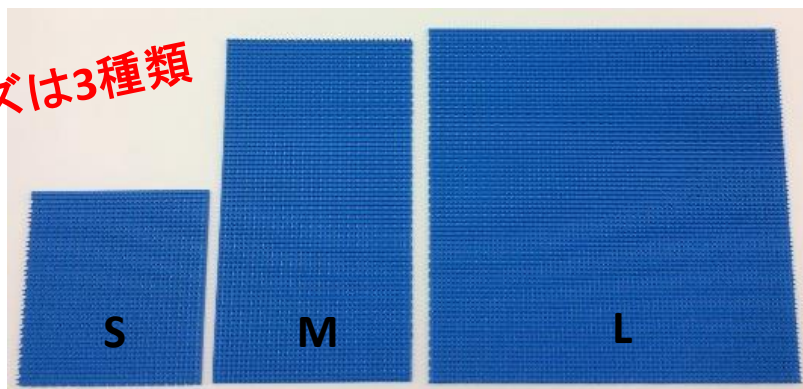

商品名	品番	サイズ(mm)	入数
シリコンマットS	SM-S-1	265×240	1枚
シリコンマットM	SM-M-1	265×480	1枚
シリコンマットL	SM-L-1	500×500	1枚

※1ケース/20枚入りです。ケースでの販売も承ります。詳しくはご相談ください。

販売店 **高砂医科工業 株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目43番地8号

TEL : 03-3815-0156 FAX : 03-3815-5361

<http://www.takasagoika.co.jp>

発売元 **株式会社 アイテックス**

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF 日比谷ビル7F

TEL : 03-3580-2351 FAX : 03-3580-8610

<http://aitexinc.com>