


ELPS鉗子 Endo-scopic Laryngo-pharyngeal Surgery

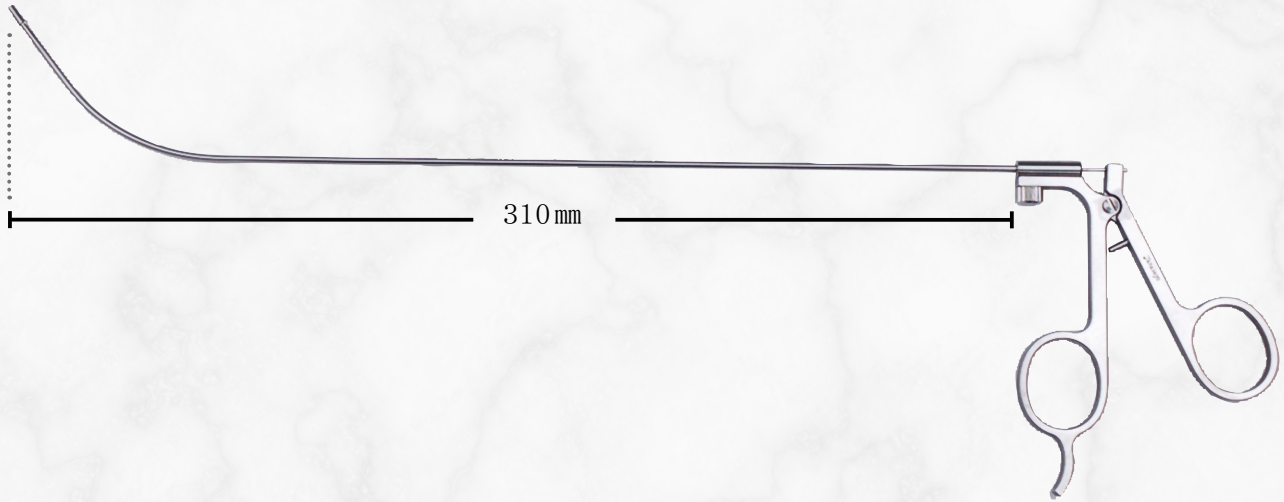

製品番号	有効長	シャフト径	開き方向	把持部特徴	把持部長	把持部幅
① TKZ-F5300	310mm	φ 2.2mm	縦開き	横溝・穴あり	5mm	2.6mm
② TKZ-F5301			縦開き	ドベーカー溝	7mm	
③ TKZ-F5302			横開き	ドベーカー溝	7mm	
④ TKZ-F5303			縦開き	ドベーカー溝	10mm	

製造販売業者：高砂医科工業株式会社
 製造販売届番号：13B1X00245100039

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
 お問い合わせは TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
 http://www.takasagoika.co.jp
 E-mail:hongo@takasagoika.co.jp
 20220530.200



ELPS鉗子の特徴

Takasago®

先端把持部に高把持力と低組織損傷性を併せ持つ
ド・ベーキー型を採用


先端把持部幅は 2.6mm とし
小さな薄い病変に対する繊細な把持に最適化

ド・ベーキー型

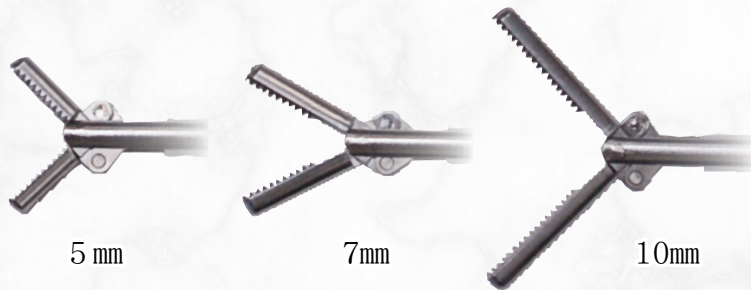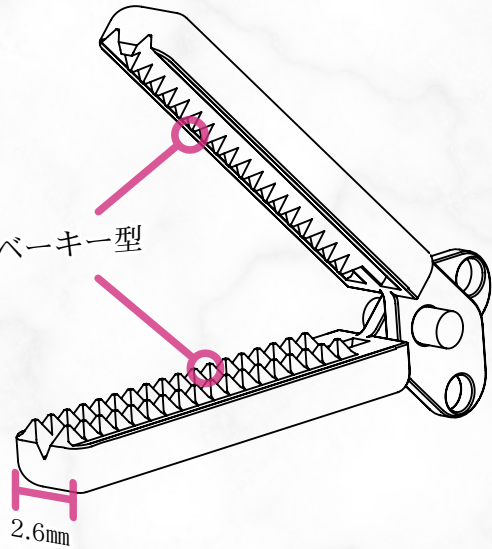

把持部長は
5mm,7mm,10mm の 3種類があり
切除病変径に応じて選択可能

可塑性の高い金属シャフトを使用し
病変局在に応じて鉗子先端の角度を変更可能

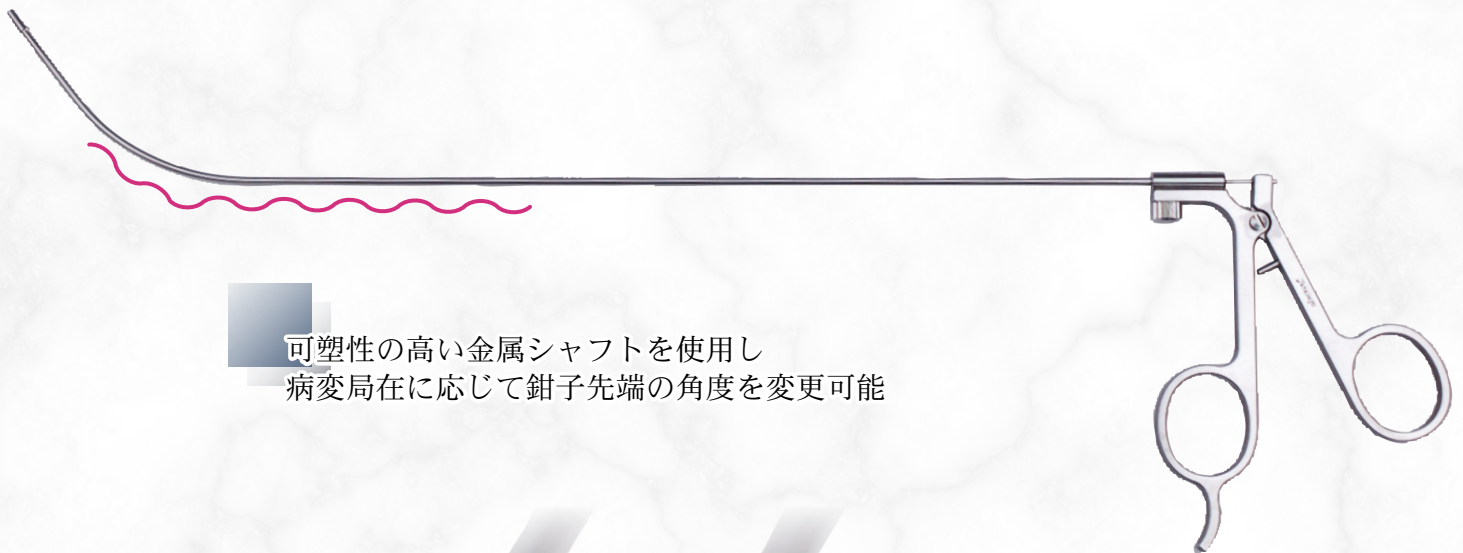

横開き

縦開き

使用頻度の高い 7mm 長鉗子では
横開き・縦開き型があり
病変の状況により最適の鉗子が選択できる