


## Y字双鉤の特徴

単孔式腹腔鏡下手術をはじめとした reduced port surgery における閉創時、確実に腹膜・筋膜へ縫合針をかけることが可能です。



**腹**壁を縫合する際に必要な糸ならびに針が双鉤の間隙を接触なく通過できます。双鉤の形状は内側が「谷」となる、Y字状です。

**谷**状に45度の角度を設けることにより、縫合針をかける位置の皮膚ならびに脂肪組織を更に圧排し牽引することが可能です。

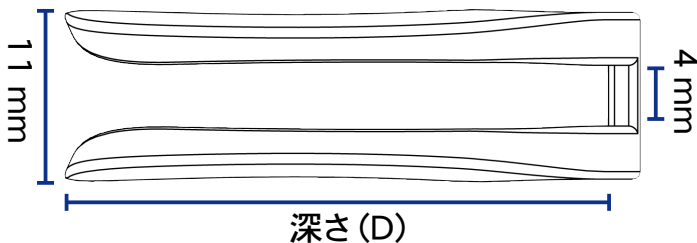

## 製品詳細

製品番号 TKZ-F1232-1

製品名 Y字双鉤 D35mm 全長 215 mm

製品番号 TKZ-F1232-2

製品名 Y字双鉤 D25mm 全長 215 mm

西陣病院 外科 高木剛先生ご指導

製造販売業者

**Takasago®**

**高砂医科工業株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-2

TEL03-3812-2668 FAX03-3812-4390

e-mail: hongo@takasagoika.co.jp

医療用具許可番号: 13B1X00245080012

Y  
字  
双  
鉤

