

管腔ダイレーター

Takasago®

腓管に針、視線を



製品紹介動画はこちらから
<https://youtu.be/d0sY92RFWnA?si=qAqldrnDWi4xPLe>

入れやすくするデバイス。


挿入方向



腓管を愛護的に縦方向へ拡張させ、
視野・術野を確保します。



手元のハンドルで
先端の溝の向きを確認できます。

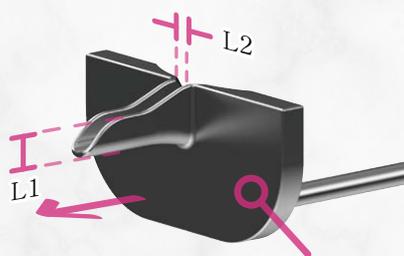

ストッパーにより器具が腓断端に固定され、
術野確保が安定します。

針を溝に沿わせることにより、正確な方向へ、
対側の腓管を損傷すること無く
運針することができます。

各寸法	L1	L2
TKZ-F2830-L ラージ	2mm	1mm
TKZ-F2830-M ミディアム	1.5mm	0.8mm
TKZ-F2830-F ファイン	1mm	0.55mm

製造販売業者：高砂医科工業株式会社

製造販売届番号：13B1X00245210001

お問い合わせは
本郷営業所まで

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
<http://www.takasagoika.co.jp>
E-mail:hong@takasagoika.co.jp